


Nach der Installation der Software muss der erhaltene Lizenzschlüssel eingetragen werden, um die Software nutzen zu können.


Dafür wird die Anwendung mit einem Doppelklick auf die Verlinkung geöffnet.

*After installing the software, the licence key received must be entered in order to use the software. To do this, open the application by double-clicking on the link.*

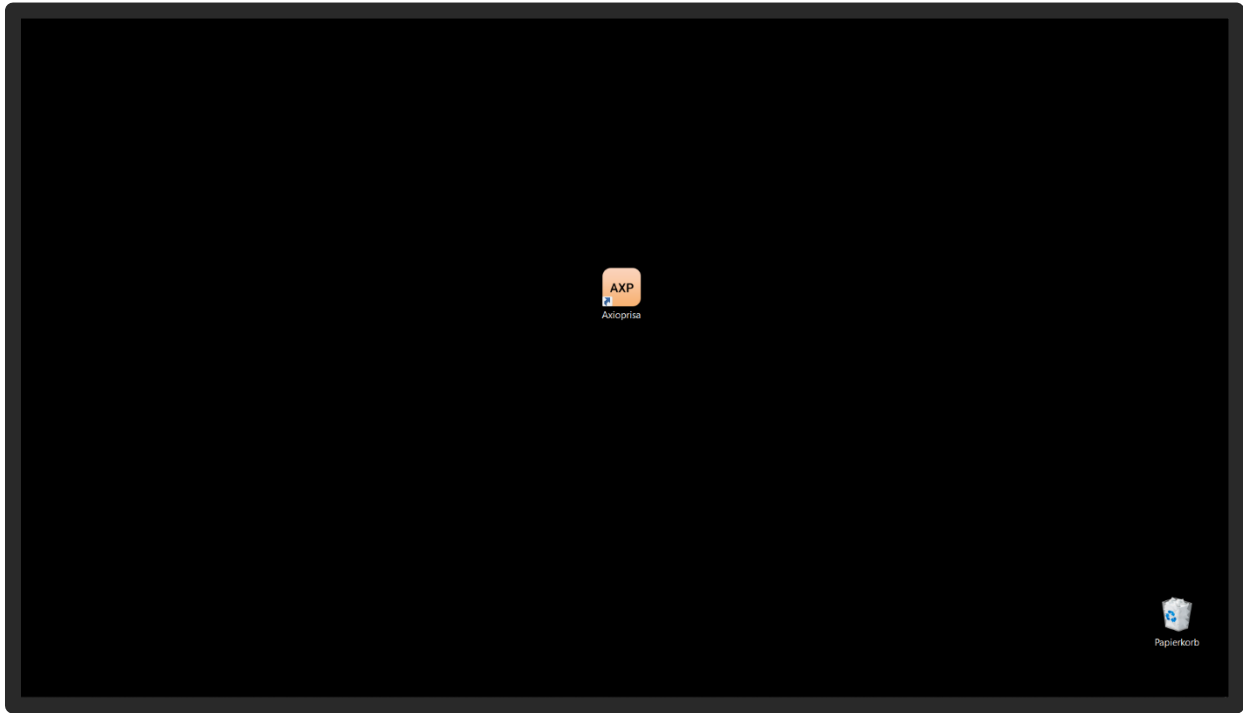


Für die Aktivierung ist eine Anmeldung notwendig. Hierfür gibt man den Namen des Behandlers oder des Laborinhabers an und hinterlegt die E-Mail-Adresse des Unternehmens.

*Registration is necessary for activation. For this purpose, the name of the practitioner or the laboratory owner is entered and the e-mail address of the company is stored.*

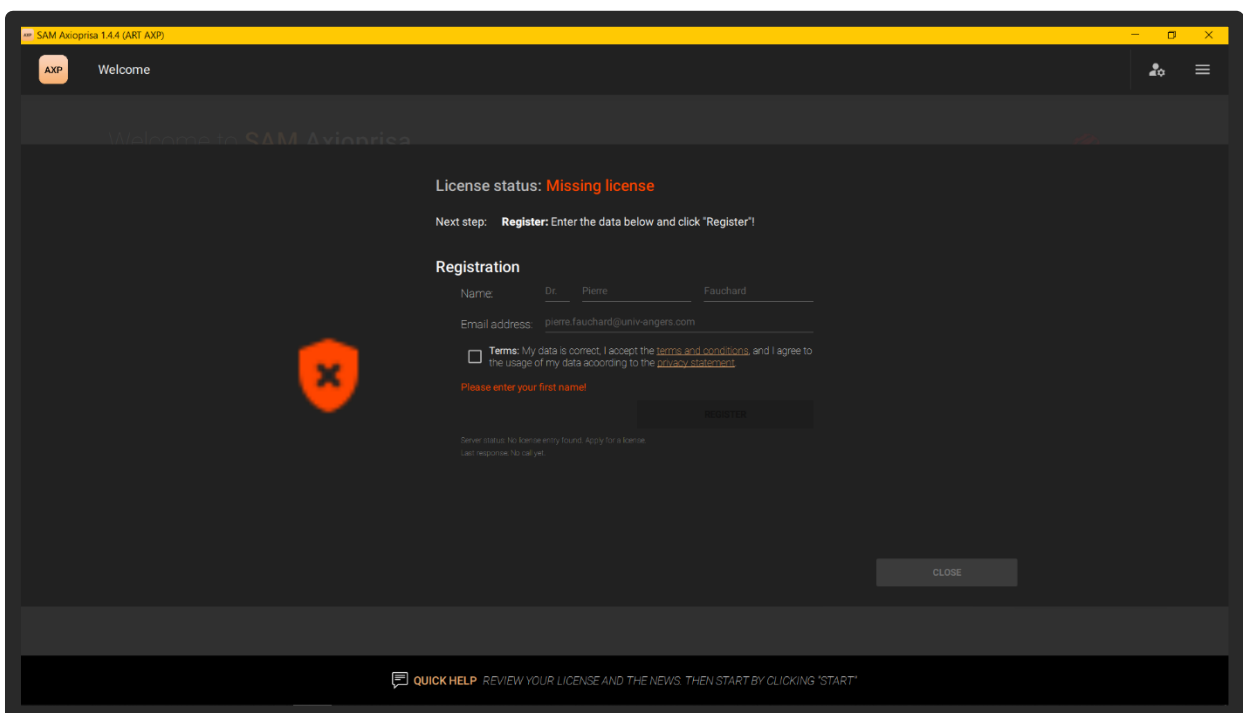


Die AGB's und die Datenschutzerklärung sollten aufmerksam durchgelesen werden und mit dem Hacken daneben bestätigt werden. Danach klickt man auf „REGISTER“ um die Anmeldung abzuschließen.

*The General Terms and Conditions and the Privacy Policy should be read carefully and confirmed with the check mark next to them. Then click on "REGISTER" to complete the registration.*

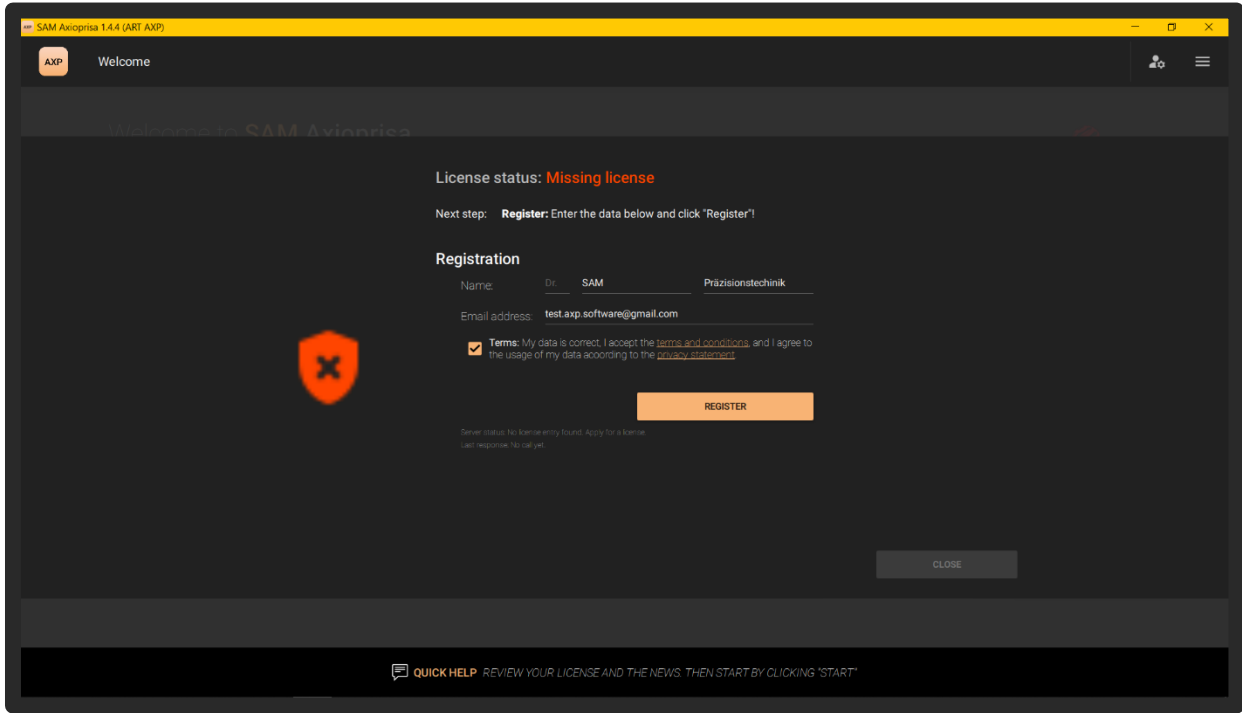


Man erhält eine Bestätigungsemail mit einem Link. Wird diese Mail nicht nach 10 Minuten im E-Mail-Fach angezeigt, sollten der Spamordner überprüft werden.

*You receive a confirmation email with a link. If this mail is not displayed in the email box after 10 minutes, you should check your spam folder.*

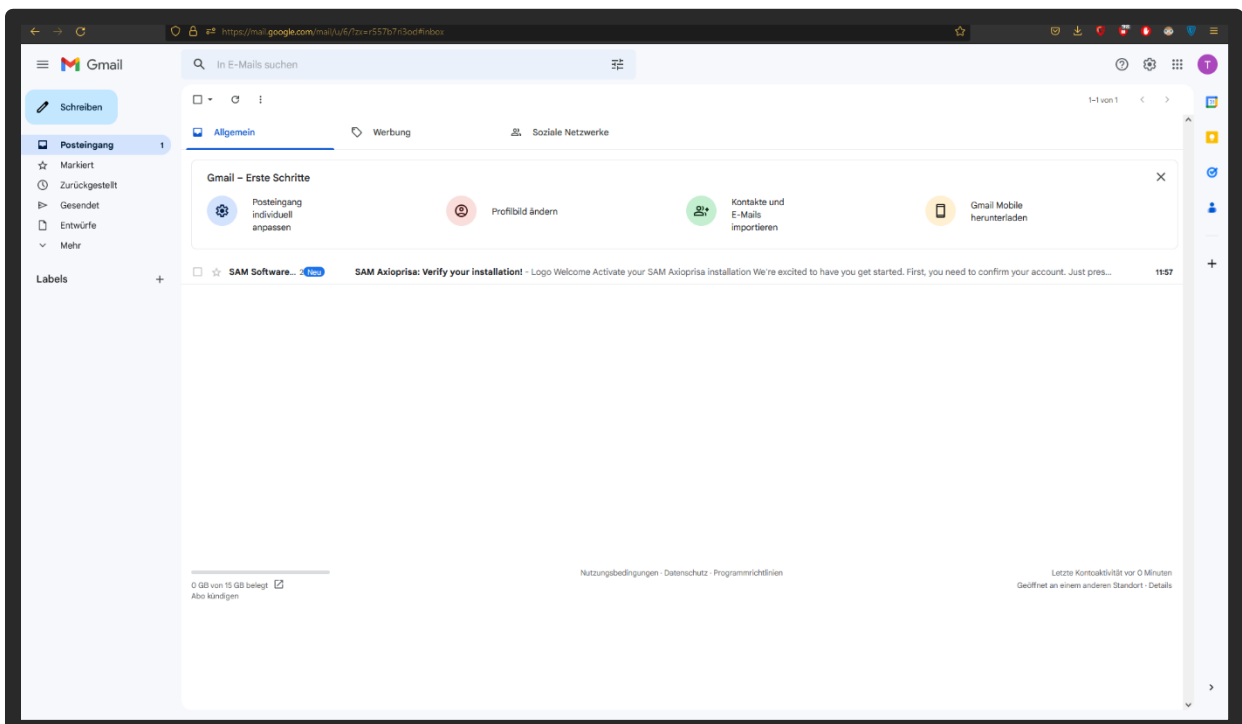


In der Mail ist ein Aktivierungslink enthalten, dieser muss bestätigt werden.

*The email contains an activation link that must be confirmed.*

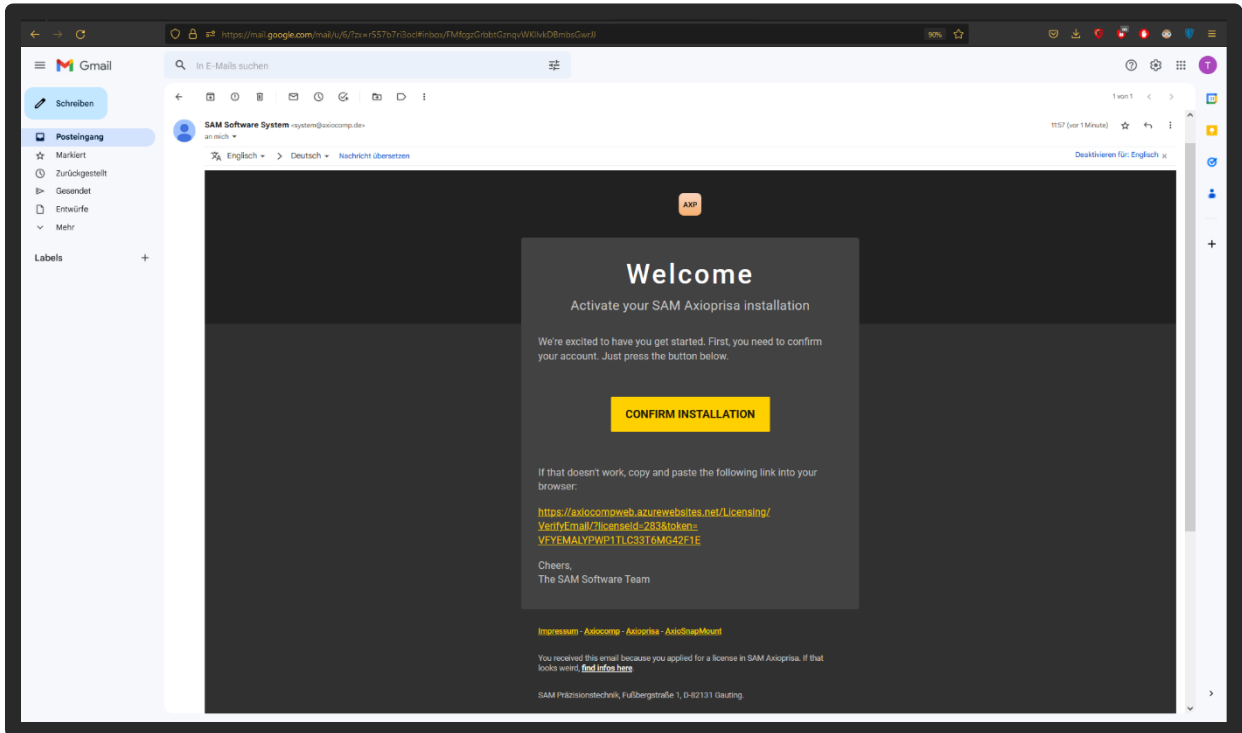

Nach bestätigen des Links wird man auf eine Bestätigungsseite weitergeleitet. Nun kann man in die Software zurückkehren.

*After confirming the link, you will be redirected to a confirmation page. Now you can return to the software.*

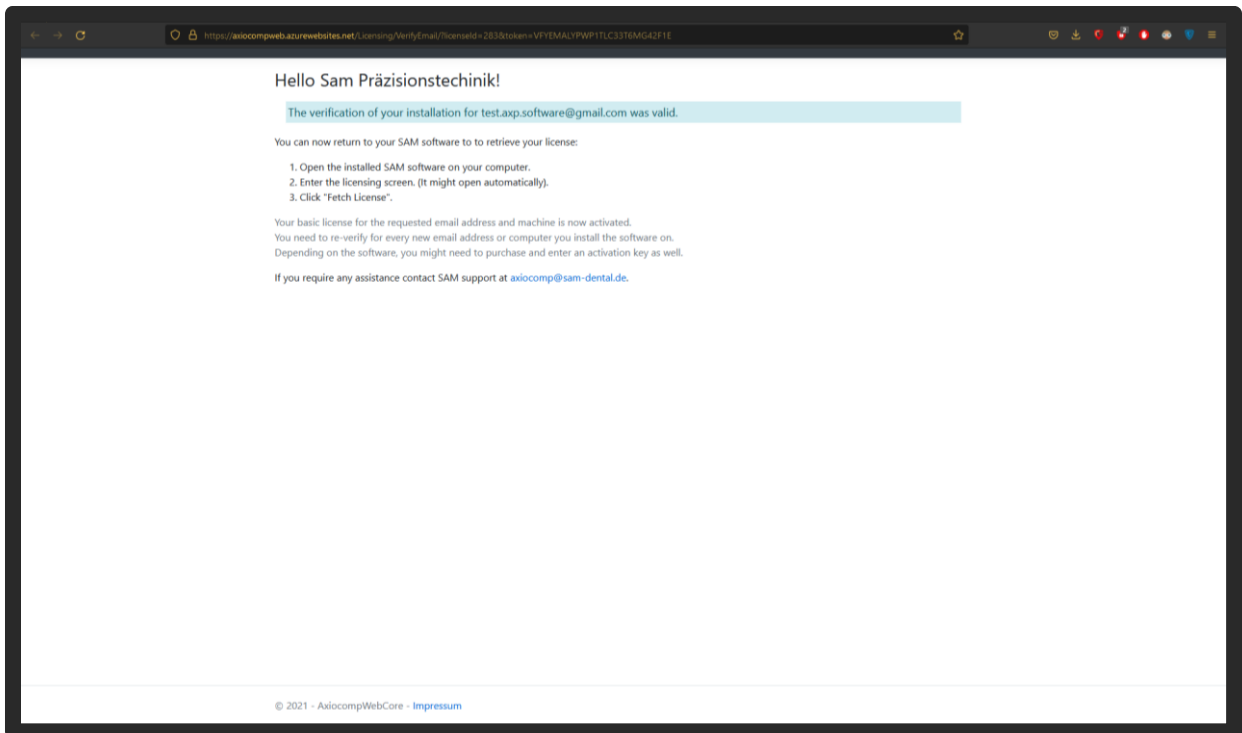

Nach der Bestätigung der Anmeldung erscheint ein weiterer Bereich für die Eingabe des Lizenzschlüssels. Der Lizenzschlüssel befindet sich auf der Lizenzkarte, die per Post versendet wurde.

*After confirming the registration, another area appears for entering the licence key. The licence key is on the licence card that was sent by post.*

The screenshot shows the SAM AxioPrisa 1.4.4 (ART AXP) software interface. The license status is "Not activated yet". The next step is to activate the product by entering a fresh license code. The registration form is filled with "Dr. Sam Präzisionstechnik" and "test.axp.software@gmail.com". The "UPDATE LICENSE" button is visible. The activation section shows a license key field with "6MFCJP2" and a "REDEEM KEY" button.


Legen Sie den Lizenzschlüssel auf der Karte frei und geben Sie den Schlüssel in dem entsprechenden Feld ein. Bestätigt wird die Eingabe mit „REDEEM KEY“.

*Uncover the licence key on the card and enter the key in the corresponding field. Confirm the entry with "REDEEM KEY".*

The screenshot shows the SAM AxioPrisa 1.4.4 (ART AXP) software interface. The license status is "Not activated yet". The next step is to activate the product by entering a fresh license code. The registration form is filled with "Dr. Sam Präzisionstechnik" and "test.axp.software@gmail.com". The "UPDATE LICENSE" button is visible. The activation section shows a license key field with "7QBR7P1" and a "REDEEM KEY" button.

Ist der Lizenzschlüssel gültig, sieht man oben das Gültigkeitsdatum in Grün. Mit „CLOSE“ kann das Fenster geschlossen werden.

*If the licence key is valid, the validity date is shown in green at the top. The window can be closed with "CLOSE".*

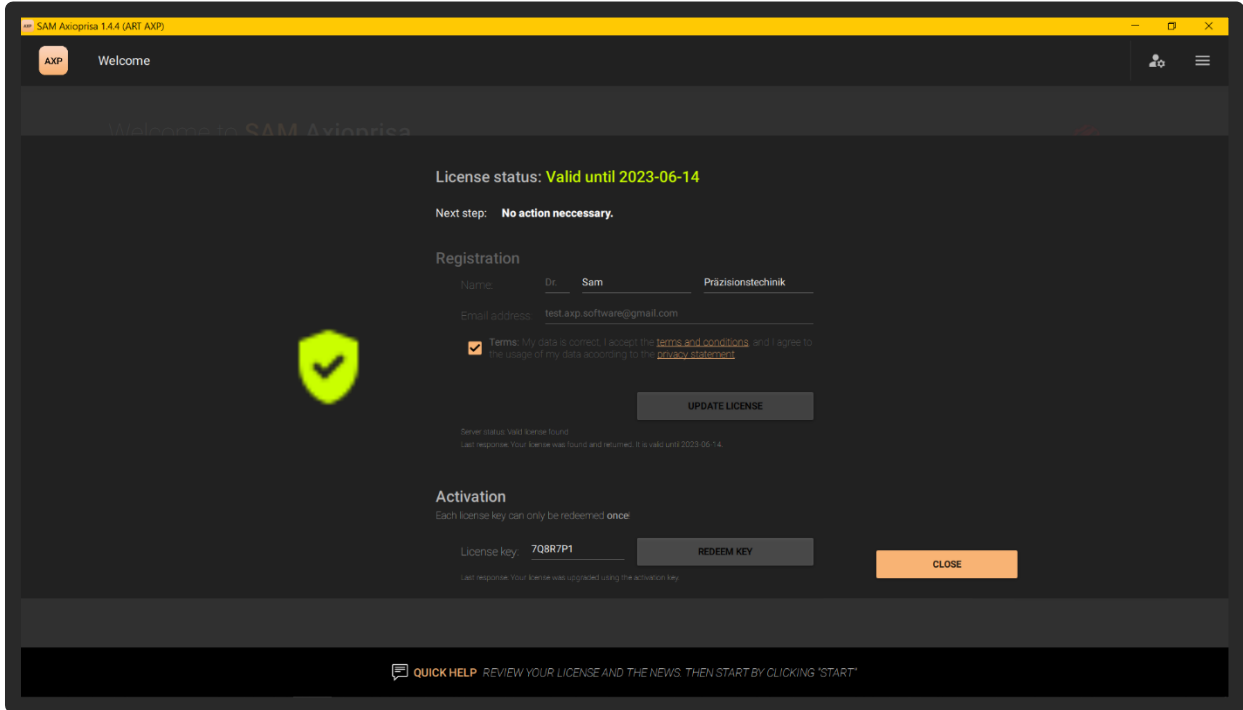

Nun kann die Software genutzt werden. Das Gültigkeitsdatum steht im Startbildschirm immer im oberen linken Bereich in grüner Schrift.

*Now the software can be used. The validity date is always shown in green letters in the upper left-hand area of the start screen.*

